

AUTOCLAVE CLASE B 23 LITROS

MARCA: GREATLAB


Modelo: B23C-V

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Equipo controlado por microordenador, revestido de acero inoxidable, con cubierta sellada.
- Dispositivo entrelazado de seguridad, tanque de agua superior de estilo abierto.
- Con programas de BD, HELIX TEST, prueba de vacío.
- Pantalla LCD
- Con estándar Europeo Clase B.
- Cuenta con seguridad de sobret temperatura, sobrevoltaje, bajo nivel de agua, anti-combustión en seco y cerradura de seguridad.
- Realiza Prevacío tres veces con función de secado
- Recordatorio de zumbador de fin de esterilización, parada automática.
- Aire frío automático, vapor de escape automático después de la esterilización.
- Generador de vapor incorporado para proporcionar vapor saturado rápidamente.
- Impresora térmica Incorporada..

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

- Volumen de esterilización: 23L ϕ 250 x 470 mm
- Presión de trabajo: 0.22 Mpa
- Temperatura de Trabajo: 121°C / 134°C
- Rango de tiempo: 0 a 99 min.
- Consumo: \leq 2200 VA / 220V
- Dimensión del equipo (mm): 480 x 560 x 450
- Dimensiones de transporte (mm): 770 x 560 x 500
- Peso Neto: 58 Kg
- Peso Bruto: 65 Kg

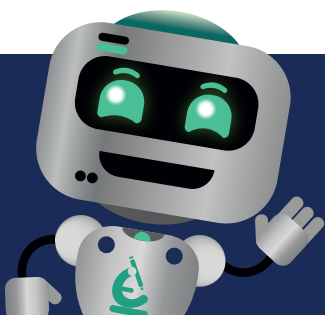

CONTÁCTANOS:

Post venta: 944 640 865
postventa@iemedic.com.pe

www.iemedic.com.pe

