

ELECTROCARDÍOGRAFO 12 CANALES

Marca: ZONCARE

Modelo: IMAC 120

DESCRIPCIÓN:

EL iMAC 120 es una máquina de ECG clásica de 12 canales. Puede adquirir, mostrar e imprimir simultáneamente formas de onda de ECG de 12 derivaciones. Es una opción ideal para uso clínico.

Cuenta con diseño de asa plegable para facilitar su transporte. También funciona como un soporte en ángulo para una mejor visualización cuando está plegado.

El diseño del teclado qwerty estándar y las teclas de método abreviado agiliza enormemente el flujo de trabajo. Se puede utilizar tanto para pacientes adultos como pediátricos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Adquisición y visualización simultánea de 12 derivaciones.
- Algoritmo de análisis de ECG de Glasgow puede trazar y diagnosticar con precisión de las ondas anormales cardiacas. Puede lograr el autodiagnóstico. Con su poderosa base de datos, el algoritmo de Glasgow puede proporcionar un diagnóstico más preciso basado en el sexo, la edad, la raza y el historial de medicamentos. Además, se ha demostrado que el algoritmo de Glasgow es más sensible y específico para detectar infarto de miocardio con elevación del ST que los criterios ESC / AAC.
- Transferencia de informe de formato: ZQECG, JPG, PDF, PNG, XML, HL7, DICOM-JPG, DICOM-PDF, DICOM-WAVEFORM.
- Método de transferencia: FTP/HTTP/Samba/DICOM
- Admite la transmisión de datos a la PC a través del puerto LAN, Wifi, puerto USB, tarjeta SD.
- Interface: 2 puertos USBs, conectores LAN, ranura para tarjeta SD; Soporte para conectarse al teclado, mouse, lector de tarjetas, impresora, etc.
- Cuenta con detección de marcapaso.
- Función de revisión y congelación de formas de onda de máx. 60 s.
- Análisis de ritmo de 1 a 5 minutos.
- Pantalla distribución: 3x4, 3x4+1, 3x4+3, 6x2, 6x2+1, 12x1, 6x2+3

CONTÁCTANOS:

ventas: 966 388 816 /969 781 595
fijo: (511) 360 6933

equipamientoventas@iemedic.com.pe

Post venta: 944 640 865
postventa@iemedic.com.pe

www.iemedic.com.pe



ELECTROCARDÍOGRAFO 12 CANALES

Marca: ZONCARE

Modelo: IMAC 120


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Pantalla: 10.4" LED full color táctil (1024 x 768)
- Frecuencia de muestreo: 32 000 Hz
- Respuesta de frecuencia: 0.01 - 350 Hz
- CMRR: ≥ 115 dB
- Corriente de fuga del paciente: $< 10\mu\text{A}$
- Circuito de entrada: $< 50\mu\text{A}$
- Nivel de ruido: $\leq 10\mu\text{Vp-p}$
- Impedancia de entrada: $\geq 60\text{M}\Omega(10\text{Hz})$
- Ganancia: 2.5, 5, 10, 20, 40, Auto mm/mV
- Rango de la frecuencia cardiaca: 30-350 bpm
- Velocidad del papel: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50mm/s
- Tamaño del papel: 210mm/216mm x 140mm-20m
- Cuando el tiempo de muestreo es de 10 segundos y el diseño es de 6x2, puede almacenar no menos de 1500 informes. Cuando el tiempo de muestreo es de 2,5 segundos y el diseño es de 6x2, puede almacenar no menos de 2000 informes.
- Duración de la batería: 10.5 horas
- Peso: 3.6 Kg



FUNCIONES AVANZADAS:

- Se puede conectar a impresora láser externa para generar el informe A4.
- Función WIFI, DICOM
- Plantilla Promedio, Histograma R-R, gráfico R-R
- Rango de bradicardia y taquicardia ajustable.
- Sistema de derivadas: Estándar, pared posterior, tórax derecho, pared posterior del tórax derecho, Prev. espacio intercostal, Siguiendo espacio intercostal, cabrera, Personalizado.

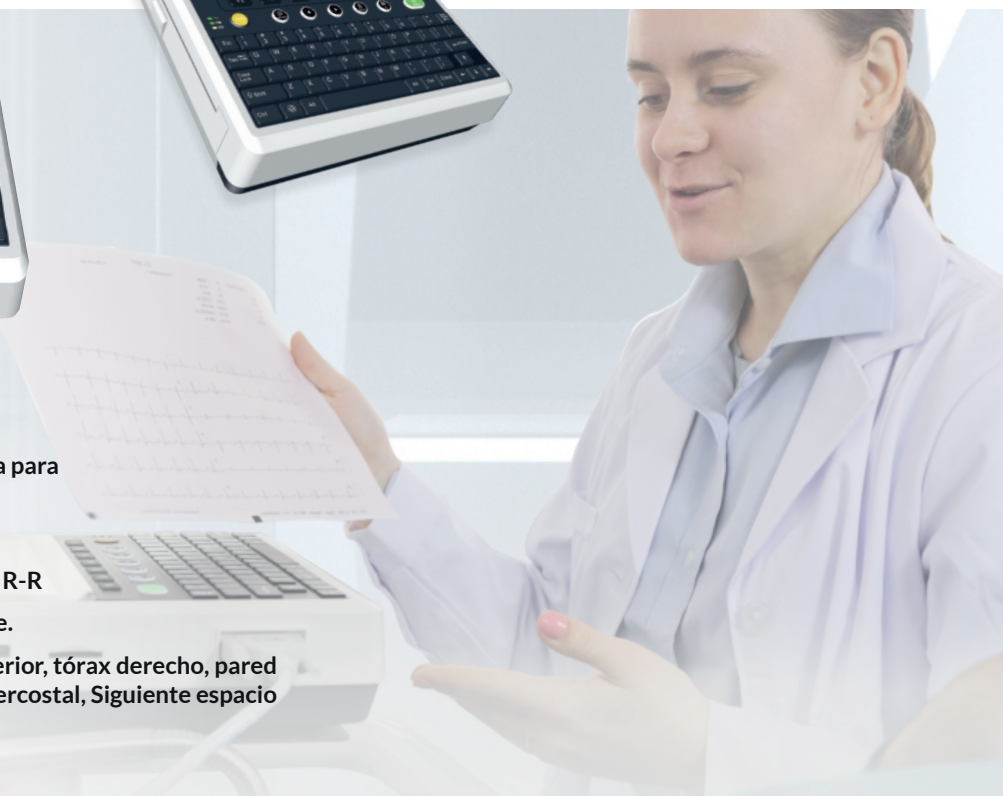

CONTÁCTANOS:

ventas: 966 388 816 / 969 781 595
fijo: (511) 360 6933

equipamientoventas@iemedic.com.pe

Post venta: 944 640 865
postventa@iemedic.com.pe

www.iemedic.com.pe

