

ESTERILIZADOR AUTOCLAVE 50 LT

Marca: COMAP KELING Modelo: LS-50HG


ESPECIFICACIONES GENERALES:

Sistema basado por microprocesadores el cual brinda un sistema confiable y seguro, con alta efectividad para la esterilización. Cuenta con una tapa protectora.

- Modelo: LS-50HG
- Cuenta con un panel LCD
- Programación:
 - Temperatura de Esterilización.
 - Tiempo de Esterilización.
 - Tiempo de secado (el equipo hace un secado estándar, secado al 70%)
- Cuenta con modos preconfigurados para instrumental quirúrgico, ropa y líquido.
- Visualización de programación en pleno proceso de esterilización.
- Muestra de temperatura en tiempo real.
- Muestra la presión en tiempo real.
- Cuenta con Válvula de liberación de presión automática.
- Cuenta con Válvula de seguridad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Presión de trabajo máxima: 0.22MPa.
- Temperatura de trabajo máxima: 134°C.
- Igualdad de calor: $\pm 1^\circ\text{C}$.
- Esterilización, rango de tiempo: 0~99min
- Máximo consumo en la fase de Esterilización: 3000W.
- Energía de consumo: 220 (1 \pm 10%) V 60 (1 \pm 2%) Hz.
- Dimensión: 650x410x1140 (mm).
- Capacidad: 50L.
- Rango de tiempo del secado: 0~99min
- Rango de temperatura de trabajo: 0~134°C
- Seguridad:
 - Dispositivo de protección contra sobrepresión, obre temperatura: liberación automática de presión,
 - Protección contra sobrecalentamiento: corte de corriente.
 - La puerta se bloqueará cuando la presión interna supere los 0.027 Mpa, con la función de trabarse
- Dimensión para transporte: 740x550x1280 (mm).
- Peso Bruto: 112Kg.

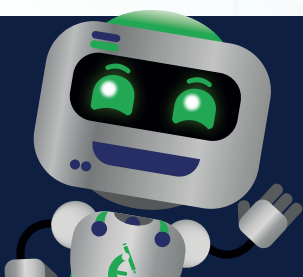

CONTÁCTANOS:

Post venta: 944 640 865
postventa@iemedic.com.pe

www.iemedic.com.pe

 **IE MEDIC**